

# PMU GERÄTE & ZUBEHÖR

## HYGIENEMODULBESCHREIBUNG

Für die Entwicklung der verschiedenen Hygienemodule verwenden wir ausschließlich die neueste Technik, hochwertige Materialien und unsere langjährige Erfahrung. Wir wissen, dass jeder PMU Stylist im Laufe der Zeit seinen eigenen Stil entwickelt. Darum ist eine große Palette verschiedener Hygienemodule

von Vorteil. Die Grundlage der Hygienemodule bildet ein medizinisch zugelassener Kunststoff, die Nadeln bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Um die einwandfreie Qualität zu gewährleisten, wird die Herstellung unserer Module unter ständiger und unabhängiger Kontrolle gehalten.

- 

**1 – NANO NT**  
Feine Lippenkonturen, feine Härchen; Nadel: steif, nicht flexibel, keine Vibration, gut für Anfänger.  
Ø 0,25 mm

**G C**
- 

**1 – NANO (1)**  
Feine Härchen, feine Lippenkonturen, Kapillarenzeichnung bei Areola, feine Schattierungstechniken; Nadel: flexibel, sehr scharf.  
Ø 0,20 mm

**G C S T**
- 

**1 – NANO (2)**  
PMU Entfernung, feine Härchen, feine Lippenkonturen, Kapillarenzeichnung bei Areola, feine Schattierungstechniken (Pixel); Nadel: mittel flexibel.  
Ø 0,25 mm

**C S**
- 

**1 – MICRO**  
Exakte Lippenkonturen, Härchen- und Schattierungstechniken, Kopfpigmentierung; Nadel: steif.  
Ø 0,4 mm

**G C S T**
- 

**1 – LINER**  
Intensive, breite Lidstriche, Augenbrauenshattierungstechniken, intensive Lippenkonturen, Kopfpigmentierung.  
Ø 0,4 mm

**G C S T**
- 

**3 – MICRO**  
PMU Entfernung, Eyeliner, Wimpernkranz, Augenbrauenshattierung, Lippenkontur, Lippenschattierung, Areola, Narben.  
Ø 0,18 mm

**G C T**
- 

**3 – OUTLINE**  
PMU Entfernung, Eyeliner, Wimpernkranz, Augenbrauenshattierung (Pixel/Powder Technik), Lippenkontur, Lippenschattierung.  
Ø 0,25 mm

**G C S T**

- 

**3 – LINER**  
Augenbrauenshattierungstechniken, Lippenschattierung, breite Lippenkontur.  
Ø 0,3 mm

**G C S T**
- 

**3 – POWER**  
Kompakte, intensive Schattierungstechniken: Lippen, Areola, Eyeliner, Wimpernkranz, Lippenkontur.  
Ø 0,3 mm

**C T**
- 

**3 – SLOPE**  
Feine Härchen, Techniken zur Schattierung der Augenbrauen, Eyeliner mit Schattierung, Wimpernkranz, Lippenkontur, Lippenschattierung, Areola.  
Ø 0,4 mm

**C S T**
- 

**3 – NANO SLOPE**  
Digital Blading für feine Härchen, leichte, regelmäßige Schattierungstechniken für: Augenbrauen, Lidschatten, volle Lippen, Areola.  
Ø 0,25 mm

**G C**
- 

**3 – NANO SPREAD**  
Pixel/Powder Schattierungstechniken für: Augenbrauen, Lidstrich, Lippen, Areola; Derma-needling von kleinen Narben; Nadeln: flexibel.  
Ø 0,25 mm

**G**
- 


**4 – FLAT**  
Derma-needling von Schwangerschaftsstreifen, Haarverdichtung; Schattierungstechniken: leichte Schatten, Kopfpigmentierung, Lippen.  
Ø 0,35 mm

**C S**


# PMU GERÄTE & ZUBEHÖR

## HYGIENEMODULBESCHREIBUNG


- G** Genius Hygienemodule
- C** Classic Hygienemodule
- S** Symphony Hygienemodule
- T** TOP Hygienemodule

- 


**5 – ROUND**  
Schattierungstechniken: Lippen, Augenbrauen, Areola, PMU Entfernung.  
Ø 0,3 mm

**C**
- 


**5 – SHADER**  
PMU Entfernung; Schattierungstechnik Pixel/Powder, Augenbrauen, Lippen.  
Ø 0,3 mm

**G C S T**
- 


**5 – POWER**  
Schattierungstechnik Pixel/Powder, Areola, Lippen, Derma-needling.  
Ø 0,3 mm

**C**
- 


**5 – MAGNUM**  
Schattierungstechniken: Areola, Lippen, Derma-needling von Narben, Haarverdichtung, große Flächen.  
Ø 0,3 mm

**C S**
- 


**5 – SLOPE**  
Schattierungstechniken: Areola, Lippen, Augenbrauen.  
Ø 0,4 mm

**C S**
- 


**5 – NANO SLOPE**  
Digital Blading für feine Härchen, leichte regelmäßige Schattierungstechniken für Augenbrauen, Lidstrich mit Schattierung, Lippenschattierung, Areola.  
Ø 0,25 mm

**G C**
- 

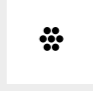
**5 – NANO SPREAD**  
Schattierungstechniken Pixel/Powder für: Augenbrauen, Eyeliner, Lippen, Areola, Derma-needling; Narben aller Art, große Flächen; Nadeln: flexibel.  
Ø 0,25 mm

**G**
- 


**7 – POWER**  
Volle Schattierungstechniken: Areola, Lippen, Derma-needling.  
Ø 0,3 mm

**C**
- 


**7 – ROUND**  
PMU Entfernung, volle Schattierungstechniken: Areola, Lippen, Derma-needling. Narben aller Art, große Flächen.  
Ø 0,3 mm

**C S**
- 


**7 – NANO ROUND**  
Schattierungstechniken: Areola, Lippen; Derma-needling, Haarverdichtung; Nadeln: flexibel.  
Ø 0,25 mm

**G**
- 

**9 – MAGNUM**  
Schattierungstechniken: Areola, Lippen; Derma-needling, Haarverdichtung, Narben aller Art auf großen Flächen.  
Ø 0,3 mm

**C S**
- 

**DERMA (6)**  
Derma-needling für Narben, Falten, Haarverdichtung; Nadeln sind fixiert am beweglichen Modulkopf.  
Ø 0,3 mm

**C**
- 




**DERMA (18)**  
Derma-needling von Falten, Pigmentflecken, Dekolleté, Hals; Nadeln sind fixiert am beweglichen Modulkopf.  
Ø 0,3 mm




**C S T**




# PMU GERÄTE & ZUBEHÖR









## HYGIENEMODULÜBERSICHT

- G** Genius Hygienemodule
- C** Classic Hygienemodule
- S** Symphony Hygienemodule
- T** TOP Hygienemodule

-  Lippe
-  Lid
-  Augenbraue

-  Korrektur
-  Areola
-  Camouflage, Gesicht

-  Kopfhaut,
-  Haarverdichtung
-  Dermaeedling

	SCHLIFF	MODULÜBERSICHT				ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN							
	S/M/L	<b>G</b>	<b>C</b>	<b>S</b>	<b>T</b>								
1 – NANO NT	S	•	•			•		•					
1 – NANO (1)	S	•	•	•	•	•		•		•			
1 – NANO (2)	S		•	•		•		•	•	•			
1 – MICRO	L	•	•	•	•	•	•	•				•	
1 – LINER	M	•	•	•	•	•	•	•				•	
3 – MICRO	S	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
3 – OUTLINE	M	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
3 – LINER	M	•	•	•	•	•	•	•					
3 – POWER	L		•		•	•	•			•			
3 – SLOPE	M		•	•	•	•	•	•		•			
3 – NANO SLOPE	M	•	•			•	•	•		•			
3 – NANO SPREAD	S	•				•	•	•		•			•
4 – FLAT	M		•	•		•						•	•
5 – ROUND	M		•			•		•	•	•			
5 – SHADER	M	•	•	•	•	•		•	•				
5 – POWER	L		•			•					•		•
5 – MAGNUM	M		•	•		•				•	•		•
5 – SLOPE	M		•	•		•		•		•			
5 – NANO SLOPE	S	•	•			•	•	•		•			
5 – NANO SPREAD	S	•				•		•		•	•		•
7 – POWER	L		•			•				•			•
7 – ROUND	M		•	•				•		•	•		•
7 – NANO ROUND	S	•				•				•	•	•	•
9 – MAGNUM	M		•	•						•	•	•	•
DERMA (6)	M		•								•	•	•
DERMA (18)	M		•	•	•								•

**S** Kurz geschliffen: schneller Pigmentfluss, Schattierung: 80 U/Min., Konturierung: 90 U/Min., Handgeschwindigkeit: schnell bis mittelmäßig  
**M** Mittel geschliffen: sanfter Pigmentfluss, Schattierung: 70 U/Min., Konturierung: 90 U/Min., Handgeschwindigkeit: mittelmäßig  
**L** Lang geschliffen: langsamer Pigmentfluss, max. 90 U/Min., Handgeschwindigkeit: ruhig, langsam